

WDS

Filtri per la ventilazione di serbatoi

Contenitori ideali per installare elementi filtranti per la filtrazione dell'aria in ingresso ed uscita dei serbatoi durante le operazioni di riempimento e svuotamento.

La serie WDS è realizzata in acciaio inossidabile con connessioni tipo clamp e Din 11851, idonee per l'impiego nelle industrie alimentari e farmaceutiche.



Caratteristiche

- Contenitori adatti per installare elementi filtranti codice 7 da 10" ,20" e 30"
- Completa tracciabilità dei materiali, ogni contenitore è identificato con un numero seriale.

Materiali di costruzione

Contenitore: acciaio inox AISI 316L.

Clamp corpo: acciaio Inox AISI 304.

Finitura delle superfici

Interna: spazzolato fine.

Rugosità a valle dell'elemento filtrante: $Ra \leq 0,8 \mu m$

Esterna: lucidatura a specchio.

Progettazione e costruzione

In accordo a EN 13445

Documentazione

Manuale uso manutenzione.

Modelli	F	Size cartuccia	*Peso Kg.	Pos.	Dimensioni nominali (mm)				
					A	B	ØD	C	E
WDS-R50-011-B7-S	TC 2"	n°1 x 2071	2,3	1	315	43	88,9	300	130
WDS-R50-012-B7-S		n°1 x 2072	3,2		565			580	
WDS-R50-013-B7-S		n°1 x 2073	4,0		815			800	
WDS-R80-031-B7-S	TC 3"	n°3 x 2071	7,8		351	97		300	400
WDS-R80-032-B7-S		n°3 x 2072	11		605			580	
WDS-R100-051-B7-S	TC 4"	n°5 x 2071	8,3	2	345	142	219	300	550
WDS-R100-052-B7-S		n°5 x 2072	11,5		595			580	
WDS-R100-053-B7-S		n°5 x 2073	14		845			800	

Nota: i modelli indicati sono relativi alle versioni più utilizzate, per configurazioni diverse vedere le opzioni indicate nella descrizione del codice prodotto.

* Peso senza cartucce


Descrizione del codice per ordinare

Serie	-	Conessioni	-	Q.tà cartucce	Lunghezza cartuccia	-	Connessione cartuccia	-	Guarnizione
WDS		R50 2" TC		01 1	10" 2071		B7 SOE codice 7		X NESSUNA
		R80 3" TC		03 3	20" 2072				
		R100 4" TC		05 5	30" 2073				


Esempio del codice per ordinare

WDS	—	R50	—	01	2	—	B7	—	X
-----	---	-----	---	----	---	---	----	---	---

Particolari	
1	Disco premi cartucce
2	Protezione anti-intrusione
3	Maniglia

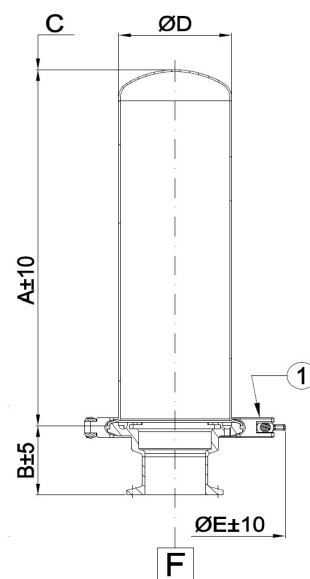

Pos.1

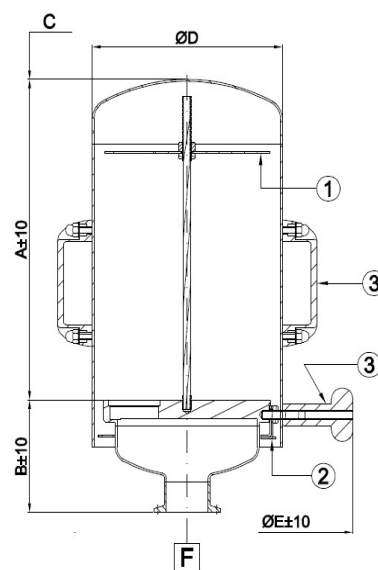

Pos.2

Limiti d'esercizio			
Stato del fluido	Gruppo del fluido	Temperatura Min/Max	Pressione
Gas	Gruppo 2 (non pericoloso)	0°C / + 150 °C	ATM
il progressivo intasamento del filtro oppure un ciclo di raffreddamento troppo veloce dopo la sterilizzazione con vapore, potrebbe causare il collasso dei serbatoi non progettati per il vuoto. L'utilizzatore deve installare adeguati sistemi di protezione quali dischi di rottura o valvole rompuvuoto.			

Bea Technologies Spa

Via Newton,4 - 20016 Pero (MILANO) Italy
 Tel.+(39) 02 339271 / Fax+(39) 02 3390713
 mail:info@bea-italy.com
 web:www.bea-italy.com

I dati riportati sono informativi e soggetti a modifiche senza preavviso. E' responsabilità dell'utilizzatore determinare l'idoneità del prodotto richiesto per un uso specifico e l'adattabilità dello stesso alle proprie procedure d'impiego.